

保管上のご注意

- 直射日光および高温多湿を避けて、室温保管してください。
- 使用後はよく乾かした後、箱・内袋に入れて風通しの良い場所に保管してください。
- 本体および箱の上に重いものを載せないでください。(変形・破損の原因となります)

取扱上のご注意

洗濯方法

- カバーおよび本体が汚れた場合は、下記の方法で洗濯することができます。(本体のサポートフレームは水洗いできません。汚れた場合はぬらした布などで拭き、陰干ししてください)
- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- 熱湯・静電気防止剤・塩素系漂白剤の使用およびドライクリーニングは絶対に避けてください。(色の異なるものとは分けて洗濯してください)
- 洗濯後は形が崩れないように、平らで風通しの良い場所で陰干ししてください。
- 乾燥させる時は、直射日光やストーブの近くは避け、アイロンや乾燥機は絶対に使用しないでください。(直射日光での天日干しは、本体のウレタンフォームの劣化となるため避けてください)
- 長期間の使用や汚れ、洗濯の繰り返しにより、カバー表面の撥水性が低下することがあります。

廃棄方法

- 本製品の各パーツは素材が異なります。(素材名は中面「本品の構造」に記載)廃棄する場合は各自治体の分別方法に従ってください。

修理について

- 本品の構造上、修理はできませんので予めご了承ください。

(カバーは別売りもご用意しております)

種類と規格

品名	種類	商 品 コードNO.	規 格		1函 入数
			厚さ×縦×横	重量	
リフレア	スカイブルー	標準サイズ	17631	7.5cm(後側10cm)×39cm×39cm	0.5kg 1枚
リフレア・高通気カバー	スカイブルー	標準サイズ用	17641	7.5cm(後側10cm)×39cm×39cm	— 1枚

アルケア株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825 <http://www.alcare.co.jp>

東京営業所 TEL.03-5638-8161 仙台営業所 TEL.022-715-2733 広島営業所 TEL.082-831-8777
首都圏東営業所 TEL.048-834-5614 名古屋営業所 TEL.052-222-3860 福岡営業所 TEL.092-441-8372
首都圏西営業所 TEL.045-472-7511 北陸営業所 TEL.076-243-5602
札幌営業所 TEL.011-261-1721 大阪営業所 TEL.06-6337-2985

INTERNATIONAL SALES DIVISION TEL.81-3-5611-7819 ■アルケア医工学研究所 ■千葉工場 ■オストメイトサービスセンター

505-908

ALCARE

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

REFRAIR リフレア

スカイ
ブルー



高通気性車椅子クッション
HIGHLY VENTILATED WHEELCHAIR-CUSHION

はじめに……

《リフレア》は、車椅子に座る際の体圧の分散とムレを低減することを目的とした車椅子クッションです。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせずこの取扱説明書に従いご使用ください。尚、商品についてご不明な点は下記までご連絡ください。

●アルケア株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル0120-770175

使用上のご注意

*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。



警告 人身事故につながる恐れのある注意事項

- 使用中に痛みやしびれが出た場合は使用を中止してください。
- カバーの着座部分は、化繊を使用しておりますので本品の使用によりかぶれなど何らかの異常が発生した場合には使用を中止してください。


注意 物損事故につながる恐れのある注意事項

- ファスナーを着衣に引っかけないようご注意ください。
- 商品を袋から出す時や使用する時は、爪等の硬いもので座面を引っ掛けないように注意してください。指先の肌荒れや伸びた爪等で伝線する場合がありますので、必要に応じて手袋を着用していただくなど、お取り扱いには十分注意してください。

本品の構造

弾性の異なる3種類の素材の組み合わせにより、的確に体圧を分散します。

本体・立体トリプル構造

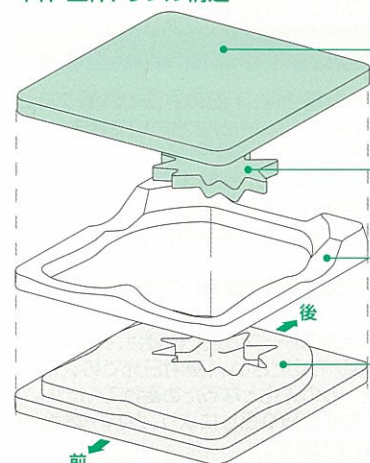


トップパッド
高通気・低反発
ウレタンフォーム
ムレを防ぎ、臀部にぴったりフィットしてやさしく支えます。

メイプルパッド
高通気・低反発
ウレタンフォーム
かえで型のパッドと、弾性の違うベースパッドの組み合わせで、局所にかかる圧力をなめらかに分散します。

サポートフレーム
ビーズ発泡
ポリエチレン
骨盤や臀部を安定させて正しい姿勢を保ち、前方へのすり落ちを防ぎます。

ベースパッド
高通気・高弾性
ウレタンフォーム
ムレを防ぎ、高いクッション性で座面全体をしっかりと支えます。

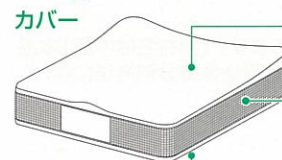

トップカバー
高通気・撥水抗菌加工
ポリエステルニット
ムレを防ぎ、快適な座り心地を保ちます。

サイドメッシュ
軟質ポリプロピレン
樹脂
クッション内部の空気を外に逃がし、ムレを防ぎます。

ベースカバー
ウレタン樹脂コーティング
ポリエステル布
すべりにくい素材で、クッション自体のすり落ちを防ぎます。

使用方法

- 前後に注意し、座席に置いてご使用ください。
(カバーにある「前」表記が車椅子座面の前面となるように置いてください)

- 本品の上には何もかけないでください。(体圧の分散の効果が発揮しにくくなります。また、ズレの原因にもなります)
- 本品は、体圧の分散・ムレを低減することを目的としていますが、使用者の活動性・身長・体重等により、その効果、およびその耐用年数が異なります。

